


# CAL SODADA DRÄGERSORB®

La cal sodada es esencial para la absorción de CO<sub>2</sub> durante la inspiración del paciente conectado a una máquina de anestesia con circuito de reinalación

## DRÄGERSORB®

- **Disminuye costes** debido a su alta eficiencia y mayor duración de uso
- **Mayor protección** del paciente y de los equipos debido a la menor creación de polvo
- **Seguridad adicional** para el paciente al reducir la producción de sustancias de desecho cuando se reseca
- **Manejo limpio y comodo** con la opción de canister desechable

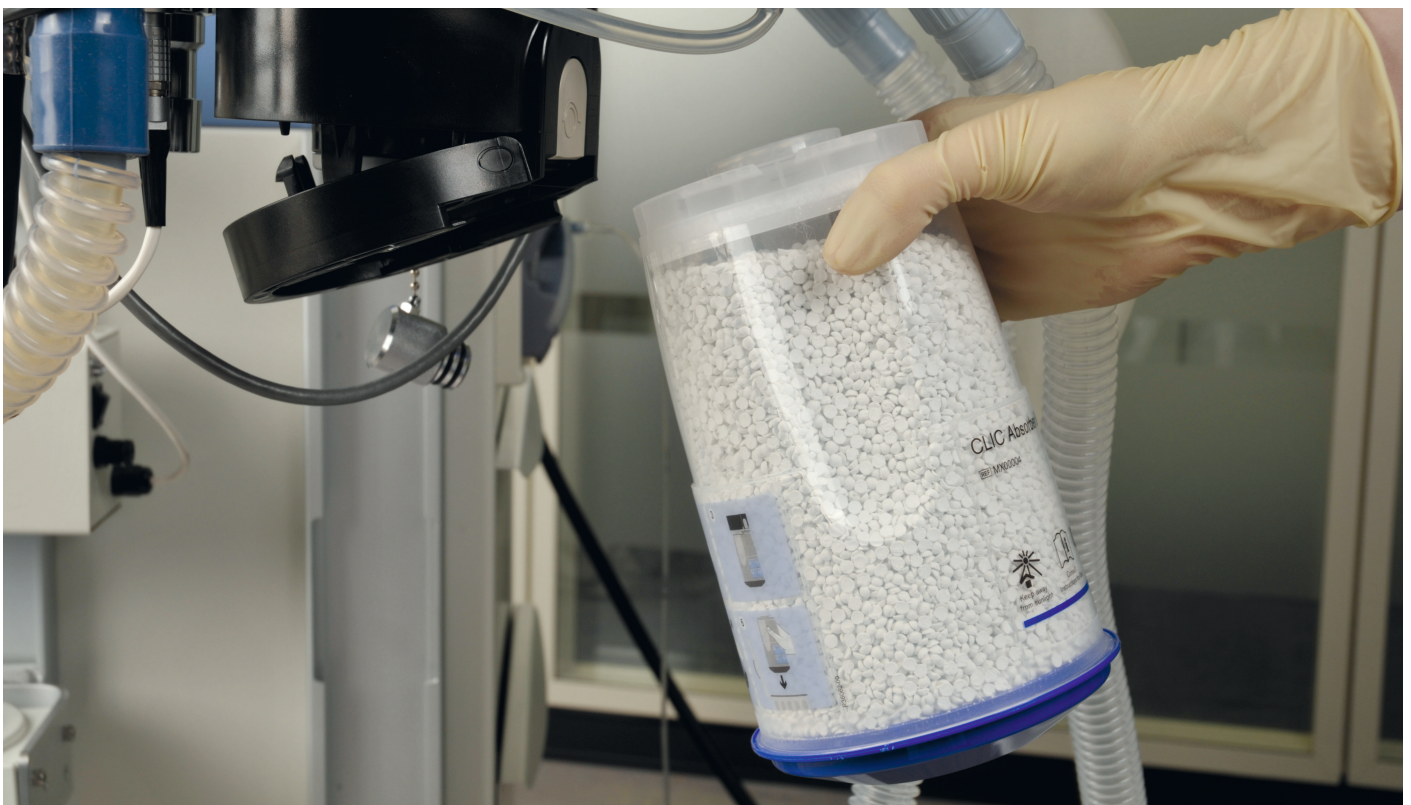

## OPTIMIZACIÓN DE COSTES

Gracias a la forma especial de los granulos, Drägersorb® 800+ no sufre la formación de canales. La cal sodada Drägersorb® 800+ absorbe CO<sub>2</sub> uniforme y eficazmente. La forma de los granulos y su alta porosidad ofrecen una superficie óptima. Drägersorb® 800+ es capaz de absorber más CO<sub>2</sub> y dura más que la cal soda convencional.

## MANEJO FÁCIL Y LIMPIO

Los canister desechables Drägersorb® CLIC, que se pueden usar con todas las máquinas modernas Dräger, proporcionan una solución rápida, limpia y sencilla.

- No hay que manipular la cal sodada por parte del personal
- Ningún contacto con polvo
- Reduce los costes ya que se puede cambiar en cualquier momento, incluso durante la cirugía



Garrafa de 5 litros para canisters reutilizables



Canister desechable 1,2 L



Adaptador para canister desechable

## PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CLÍNICO

La forma y composición de los granulos de Drägersorb® 800+ mejoran su resistencia a la abrasión produciendo menos polvo. Esto ayuda a proteger los pulmones del paciente y del personal de la clínica. Además protege la inversión y reduce costes de mantenimiento ya que el polvo es dañino para la tecnología de los equipos de anestesia.

## SEGURIDAD ADICIONAL

La cal sodada Drägersorb® 800+ reduce significativamente la generación de productos de descomposición en caso de que la cal sodada se seque accidentalmente antes de su uso. Se puede usar con todos los tipos de agentes halogenados. Por supuesto, solo la cal sodada fresca garantiza unos resultados óptimos. El cambio de color de blanco a violeta indica que la cal sodada debe ser cambiada.

Código	Descripción
MX00001	Drägersorb® 800+ (2 unidades de 5 L)
MX00004	Drägersorb® 1.2 L CLIC 800+ Canister desechable (6 unidades)
MX50090	Drägersorb® CLIC Adapter

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)  
Teléfono 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | [atencioncliente.vetcare@bbraun.com](mailto:atencioncliente.vetcare@bbraun.com) | [www.bbraun-vetcare.es](http://www.bbraun-vetcare.es)

